



Advion Interchim scientific[®] expression[®] CMS 質譜儀




可直接注入樣品或以探針進行樣品成分分析，亦可與多種設備進行串聯，進行快速並準確地分析

■ CMS串聯HPLC可偵測PFAS

HPLC/SIM chromatograms of 18 PFAS compound (std)

5ppm_AGN1_MeOH1_40_80_SIM_11.datx
ESI - Max: 6.7E6

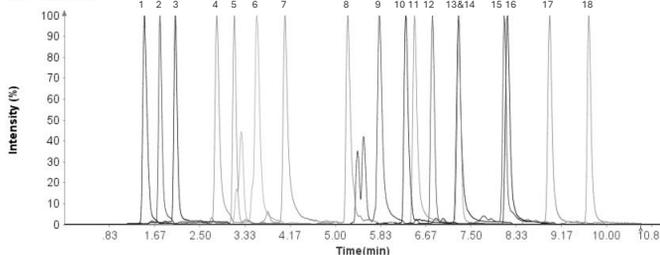

	Acronym	RT (min)
1	PFBS	1.5
2	PFHxA	1.8
3	HFPO-DA	2.1
4	PFHpA	2.8
5	ADONA	3.1
6	PFHxS	3.5
7	PFOA	4.1
8	PFNA	5.2
9	PFOS	5.8
10	PFDA	6.3
11	9Cl-PF3ONS	7.4
12	NMeFOSAA	6.8
13	NETFOSAA	7.3
14	PFUnA	7.3
15	PFDoA	8.1
16	11Cl-PF3OUdS	8.2
17	PFTrDA	9.3
18	PFTA	9.6

MARKES international

自動化分析氣體樣品的預濃縮熱脫附系統

適用於各大品牌GC和GC-MS



Focusing trap: PFAS trap U-T24PFAS-2S
PFAS Extended volume tubes (C3-AAXX-5426)

- 電子制冷系統, Cryogen-Free
- 可選用吸附管、canister或on-line sampling
- 除水系統kori-xr可減少干擾
- 依據目標物選擇合適的focusing trap進行樣品預濃縮



environmental express[®] 石墨加熱消化系統

an antylia scientific company

通過U.S. EPA認可

- 石墨消化專用，可耐溫130度；材質為Polypropylene (PP)。
- 樣品瓶重金屬含量為最低，可有效防止背景值汙染，並有效檢測重金屬含量。
- 體積認證精確度在 0.5% 以內，附68種重金屬背景值檢測之COA。
- 搭配Filtration Systems，從消化到樣品過濾、上機，樣品保存在同一個消化瓶執行，減少樣品轉移間之繁瑣過程，樣品汙染及樣品損失。



※符合EPA Method: 3005, 3010, 3050A, 3050B, 200.2, 200.7, 7470A, 7471A, 245.1, 1631, 345



HotBlock[®] 150



HotBlock[®] 200 with controller



安全瓶蓋 廢液瓶過濾頭

保護實驗室人員健康與環境安全

Safety Caps with air valve

- 落塵不進入溶劑瓶中
- 有機溶劑揮發氣體不向外逸散
- 提供三種尺寸適應不同管線
- 以盲塞將暫不使用的通道塞住



Ø 1.6 Ø 2.3 Ø 3.2 blind plugs

inpac 俊懋企業股份有限公司

INTERNATIONAL CORPORATION



- 台北市大安區辛亥路一段30號11樓
- E-mail: inpac@inpac.com.tw
- 電話: 02-2363-7996